

# Ulthera 4D



Cala Medical



دستگاه هایفو اولترا 4D

Ulthera 4D

Non-Invasive Skin  
Tightening & Lifting Treatment


Hifu  
Rf fractional



هایفو اولترا 4 بعدی، یکی از شاخص ترین دستگاه های هایفو، با طراحی زیبا و محیط کاربری آسان می باشد.

هایفو از جمله تکنولوژی هایی است که در سال های اخیر در زمینه جوانسازی و لیفتینگ مورد استفاده بسیاری قرار گرفته و تاثیرات بسیار ماندگارتری نسبت به سایر متدها دارد.

هایفو لغتی مخفف از ترکیب حروف اول چهار کلمه: High Intensity Focus Ultrasound به معنی امواج اولتراسوند متمرکز و با شدت بالا است. درمان با این روش نیمه تهاجمی بوده و برای کسانی که از عمل جراحی و روش های تهاجمی هراس دارند یا به هر علتی از آن اجتناب می کنند، توصیه می شود.

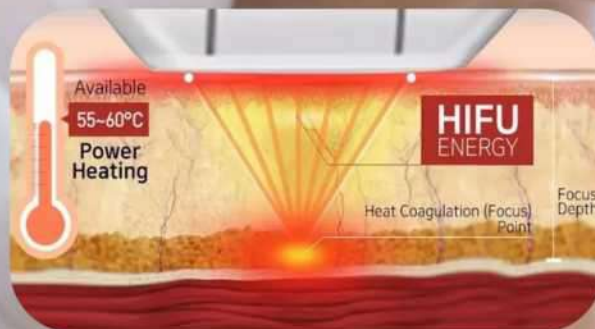


هایفو چهار بعدی دارای دو مدل است:

- مدل اول: دارای هندپیس هایفو سه بعدی و هندپیس هایفو واژینال
- مدل دوم: دارای هندپیس هایفو سه بعدی و هندپیس آر اف فرکشنال




● هندپیس هایفو 3 بعدی دستگاه به صورت پیش فرض دارای کارتریج های 1.5mm, 3mm, 4.5mm می باشد و کارتریج های 8mm و 13mm که برای بدن مورد استفاده قرار می گیرد، می توانند به انتخاب مشتری به پکیج اضافه شوند.

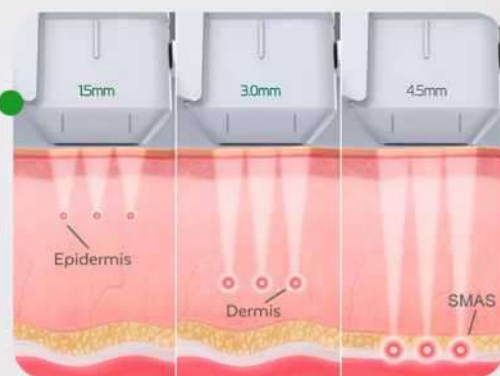


● هندپیس واژینال دارای کارتریج های 3mm, 4.5mm است.

● کارتریج ها توانایی شات زنی در 11 لاین را دارند.

● طول عمر هر کارتریج های صورت و بدن 20.000 شات و کارتریج هندپیس واژینال 10.000 شات است.

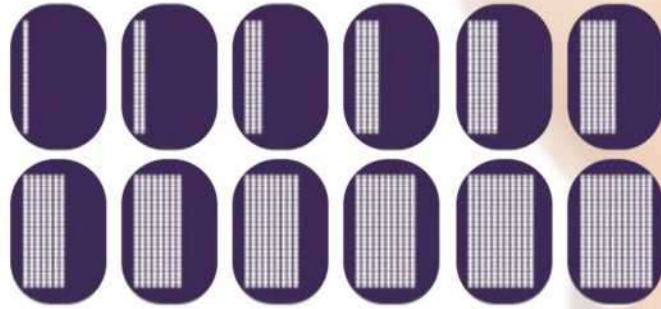


### تفاوت هایفو سه بعدی و تک لاین

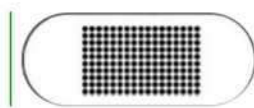

سه بعدی

VS

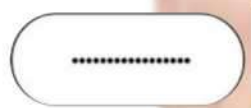

یک خط

تک لاین

سطح کم و نقاط محدود



از یک تا 11 خط بیش از 30 هزار شات



تعداد شاتهای زیاد برای درمان یک سطح کوچک مصرف میشود.

**هایفو 4D: دستگاهی با عملکرد درخشان و قیمت مناسب.**

## چرا برای جوانسازی از دستگاه های هایفو استفاده می کنیم؟




درمان با هایفو به یکی از پرطرفدارترین درمان های لیفتینگ صورت، گردن و بدن روز دنیاست. علت نیز مشخص است؛ هزینه بسیار کمتر نسبت جراحی، دوران نقاهت کوتاه تر، احتیاج به مراقبت کمتر و نیمه تهاجمی بودن و از همه مهمتر درمان قدرتمند و نسبتا سریع آن از دلایلی است که باعث محبوبیت این تکنولوژی شده است.



## نتایج درمان با هایفو:

- رفع خطوط پنجه کلاغی
- کاهش افتادگی فک و چانه
- سفت شدن و لیفت پوست
- بهبود و اصلاح افتادگی ابرو
- ماندگاری طولانی تا یک سال
- بهبود خاصیت ارتجاعی پوست
- کاهش خطوط اخم پیشانی و خط خنده
- ترمیم شل شدگی پوست در ناحیه غبغب
- بهبود رنگ پوست، لطیف و روشن شدن پوست
- رفع چین و چروک گردن، پیشگیری از پیری گردن
- از بین بردن چین و چروک اطراف پیشانی، چشم، دهان و غیره
- لیفت و سفت کردن بافت پوست روی پیشانی

سیستم میکروسوزن فرکشنال RF با طراحی ویژه، سوزن های ریز کاتریج های خود را با سرعت بالا به ترتیب از طریق اپیدرم و درم تا عمقی بین 0.5 تا 3 میلی متر، وارد پوست نموده و با پخش امواج رادیوفرکانسی کار تحریک کلاژن سازی را انجام می دهد. انرژی امواج RF به خوبی به درم نفوذ کرده، پروتئین کلاژن را تحریک نموده و نه تنها یکی از بهترین روش ها برای بهبود جای زخم است، بلکه سفت و پر کردن چین و چروک پوست نیز با جلسات درمانی منظم در دسترس خواهند بود.

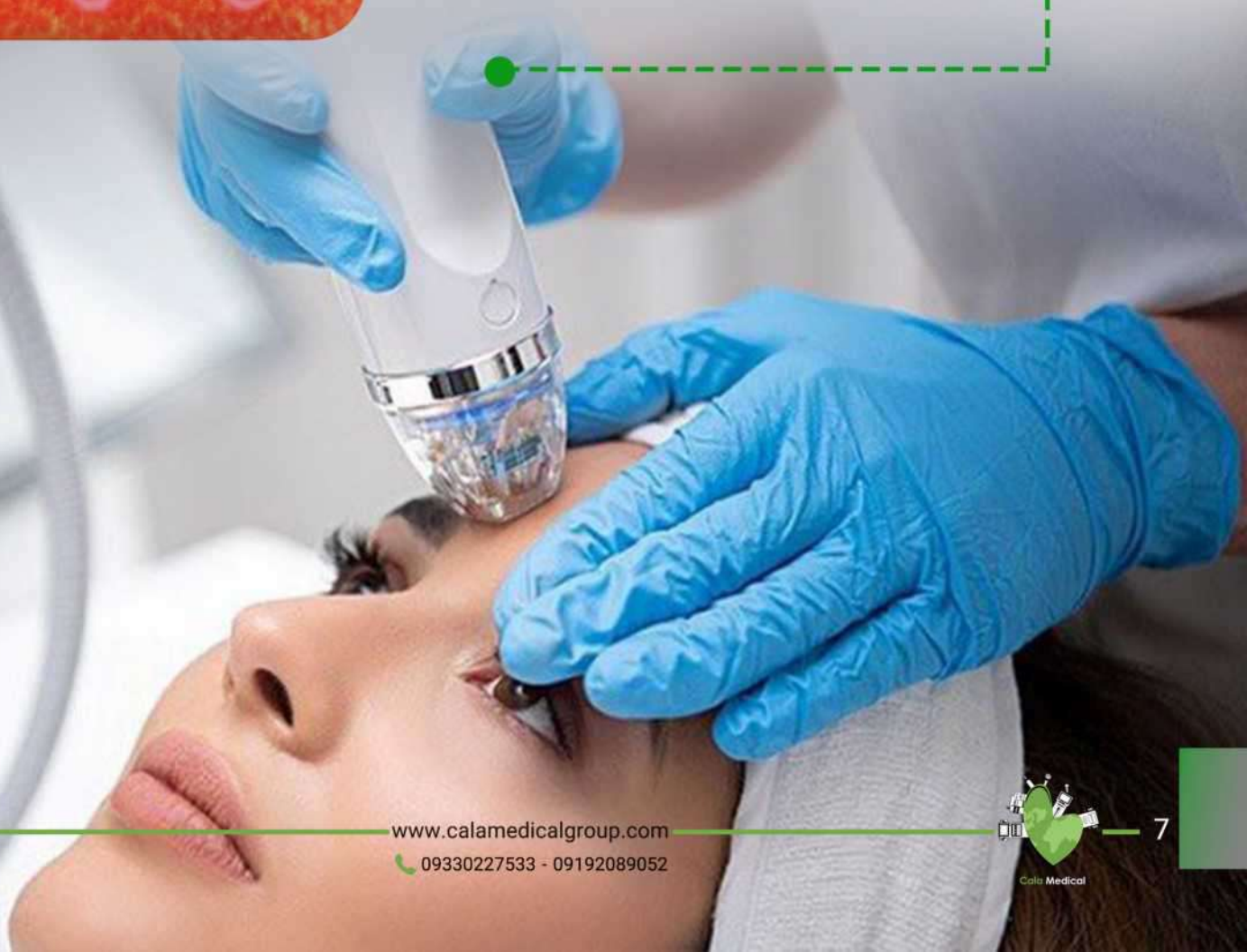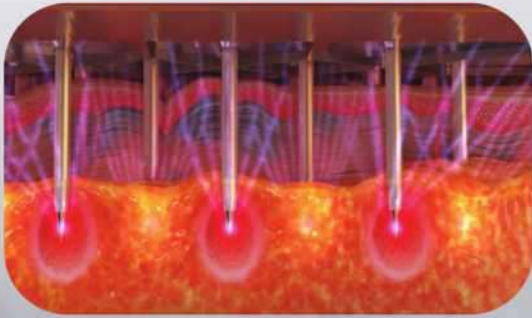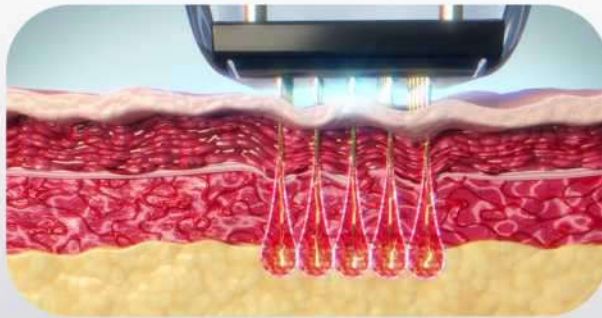




## درمان با آر اف فرکشنال مکمل درمان هایفو است!

طی دوره نقاهت حدودا 2 ماهه هایفو می توان جلسات منظم و با فاصله 10 روزه آر اف فرکشنال در نظر گرفت.

- جوانسازی
- کاهش لک
- کاهش سایز منافذ
- کمک به روند بازسازی پوست
- تقویت ساختار درم
- کمک به ساخت کلاژن
- کمک به روند جوانسازی و لیفت پوست



هندپیس هایفو واژینال دارای عمق نفوذ های 3 و 4.5 میلی متر است. انرژی حرارتی تولیدی بین 60 تا 70 درجه سانتی گراد بوده و همچنین توانایی چرخش 360 درجه داشته که باعث می شود کار جوانسازی به طور منظم و مساوی بین تمام نقاط مورد نظر انجام شود. فاصله بین جلسات هایفو واژینال مانند هایفو سه بعدی نبوده و می توان تا سه بار در سال از آن استفاده کرد. زمان هر جلسه نیز بنا به نظر پزشک بین 20 الی 30 دقیقه است.

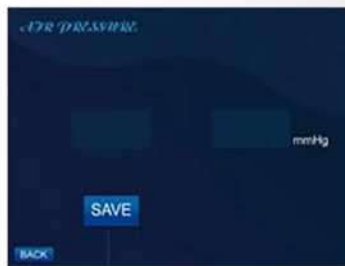

**4.5mm Standard**




**3.0mm Standard**



## نتایج درمان با واژینال:

- درمان التهاب، خشکی و سوزش واژن
- رفع افتادگی رحم و مثانه
- برطرف کردن بی اختیاری ادرار
- بهبود عفونت واژینال
- درمان سریع با ماندگاری بالا
- بدون ایجاد درد و عارضه
- بدون نیاز به جراحی، برش یا بیهوشی

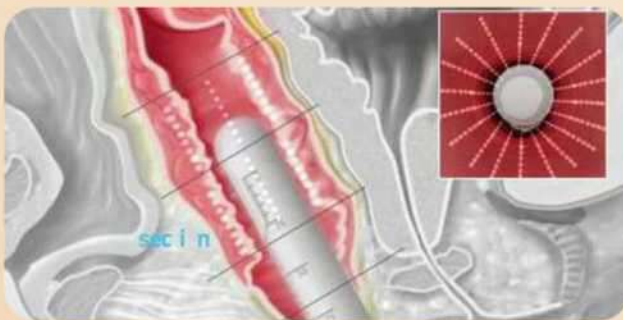


کیفیت بالای ساخت هایفو اولترا چهار بعدی، خیال شما را از بابت ماندگاری آن آسوده می کند.

- دارای یک سال گارانتی
- 10 سال خدمات پس از فروش
- ارسال آموزش کار با دستگاه به صورت ویدئو



نام دستگاه	Two in one (3D + RF) or (3D + Hifu Vaginal)
مدل دستگاه	H-21
ولتاژ ورودی	110-220V
حداکثر توان	200VA
نواحی درمان	صورت، گردن، بدن
میزان انرژی	0.1J-3.0J
فرکانس دستگاه	1-7MHz
هندپیس‌ها	4D Handle + Gold RF Handle or HIFU Vaginal
تعداد شات‌های کارتريج هايفو	20 هزار شات برای هايفو سه بعدی 10 هزار شات برای هايفو واژینال
تعداد لاین‌های هايفو	Lines 11
کارتريج‌های استاندارد	HIFU Cartridge: 1.5 ,3, 4.5mm HIFU Vaginal: 3.5, 4.5mm RF Cartridge: 10P/25P/64P/Nano
کارتريج‌های انتخابی	HIFU Cartridge: 8, 13mm Body



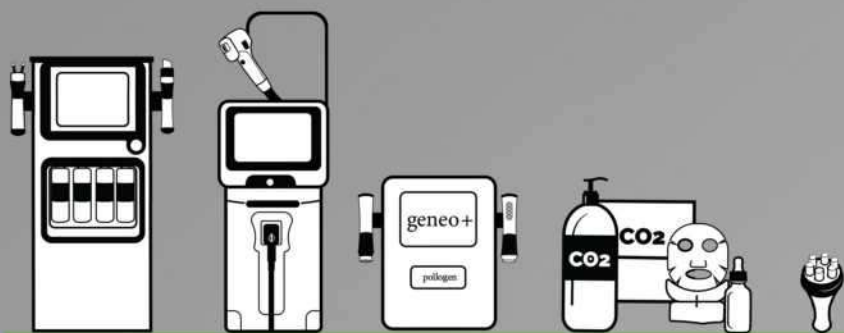

راه های ارتباطی با **کالا** مدیکال



IRAN-Tehran



09330227533 - 09192089052



[www.calamedicalgroup.com](http://www.calamedicalgroup.com)



[zibaei\\_\\_calamedical](https://www.instagram.com/zibaei__calamedical)



calamedicalgroup